

MEDI STRIP - Estrattore di varici

SCOPO

Per la rimozione transluminale delle vene varicose superficiali dagli arti inferiori.

FILO FLESSIBILE RICOPERTO IN FEP

L'alta flessibilità del filo ricoperto in FEP facilita il passaggio nelle valvole venose e minimizza il numero delle incisioni. Il filo ricoperto, poiché liscio, garantisce un passaggio facile e atraumatico nelle vene ed una rimozione veloce e senza problemi.

GRANDE RESISTENZA ELASTICA DEL FILO


Una delle caratteristiche più importanti del filo di acciaio inossidabile ricoperto in FEP è la sua elasticità. La massima tensione in trazione è di 30 Kg.

LIBERO DA TORSIONI E NODI

Lo strumento monouso è esente da torsioni ed ingincocchiamenti. Questo garantisce un'applicazione rapida ed atraumatica.

QUATTRO MISURE IN UNO STRUMENTO

L'estrattore di varici viene fornito con quattro diverse olive in policarbonato di diametro esterno 6, 9, 12 e 15 mm. Questo consente di estrarre le varici di diverse misure con un unico strumento con conseguente riduzione dei costi.

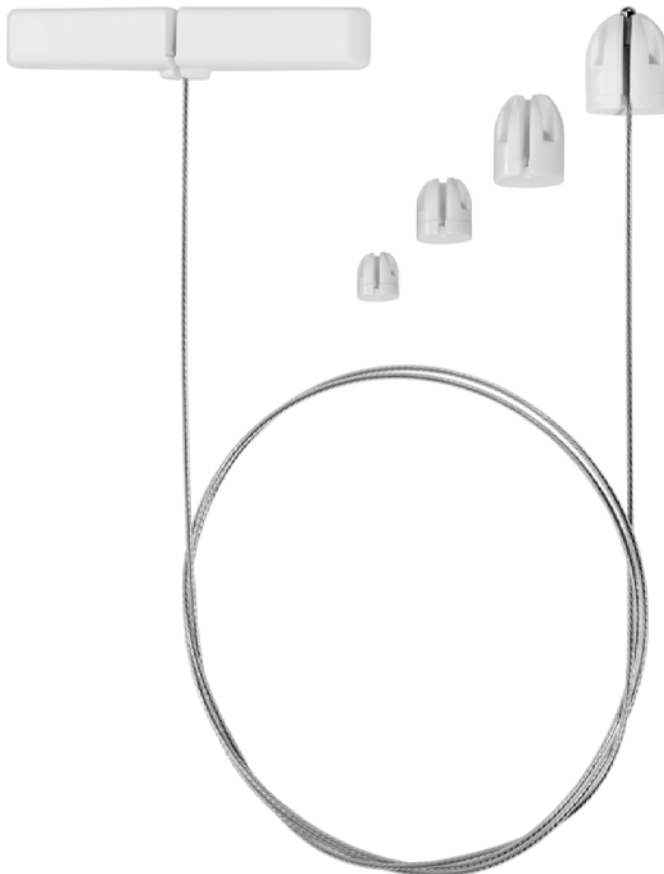

Revisione del 19.01.2007

ESTRAZIONE ANTEROGRADA E RETROGRADA

Lo speciale design delle olive consente dopo il passaggio attraverso la vena, di collegarle indifferentemente a ciascuna delle estremità del filo, permettendo una estrazione retrograda così come anterograda indipendentemente dall'accesso distale o prossimale.

PRATICA MANIGLIA

La maniglia in policarbonato, consente una impugnatura pratica ed ergonomica. Essa assicura una rimozione pratica ed efficace delle vene. Appena prima dell'estrazione la maniglia può essere posizionata indifferentemente all'estremità distale o prossimale del filo.

SPECIFICHE

Filo: lunghezza 100 cm., in acciaio inossidabile, radiopaco, rivestimento in FEP. Maniglia: in policarbonato, larghezza 8 cm. Olive: in policarbonato. Confezionamento in doppia busta

CODICE

01.3200 Estrattore di varici
Box da 10 pz.



Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it