


SIM MICRO CANNULA Í SLOW REACTIONÍ 90°L


CANNULE DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO RUOTATE DI 90° A SINISTRA
COMPLETE DI MANIPOLO CON CONTROLLO DI ASPIRAZIONE Ø 1,5 MM.

- Il foro di controllo della aspirazione ha un **diametro di 1,5 mm.**, questo consente al chirurgo di avere una risposta molto più lenta. Quando il foro viene aperto, la diminuzione della aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo. Anche in caso di pressioni di aspirazione relativamente elevate queste cannule mantengono una bassa rumorosità
- Particolarmente adatte negli interventi di Neuro Chirurgia, ORL, Maxillo Facciale, in Chirurgia dentale e più in generale in Micro Chirurgia
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate e disassate di 90° rispetto al manipoLO per facilitare l'impugnatura laterale
- ManipoLO con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Punta arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili


Revisione del 15.04.2011

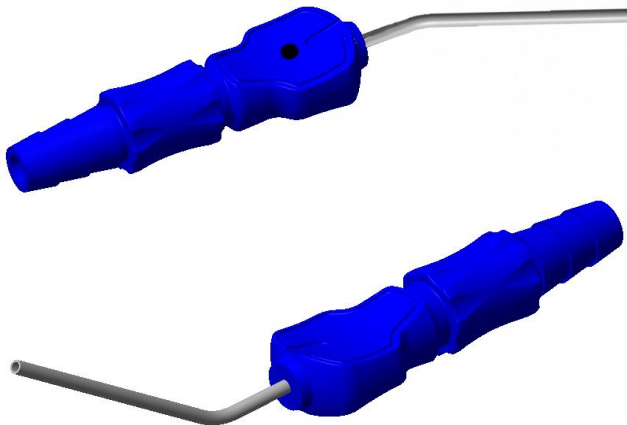

CE CLASSE IIa
0476 REGOLA 6

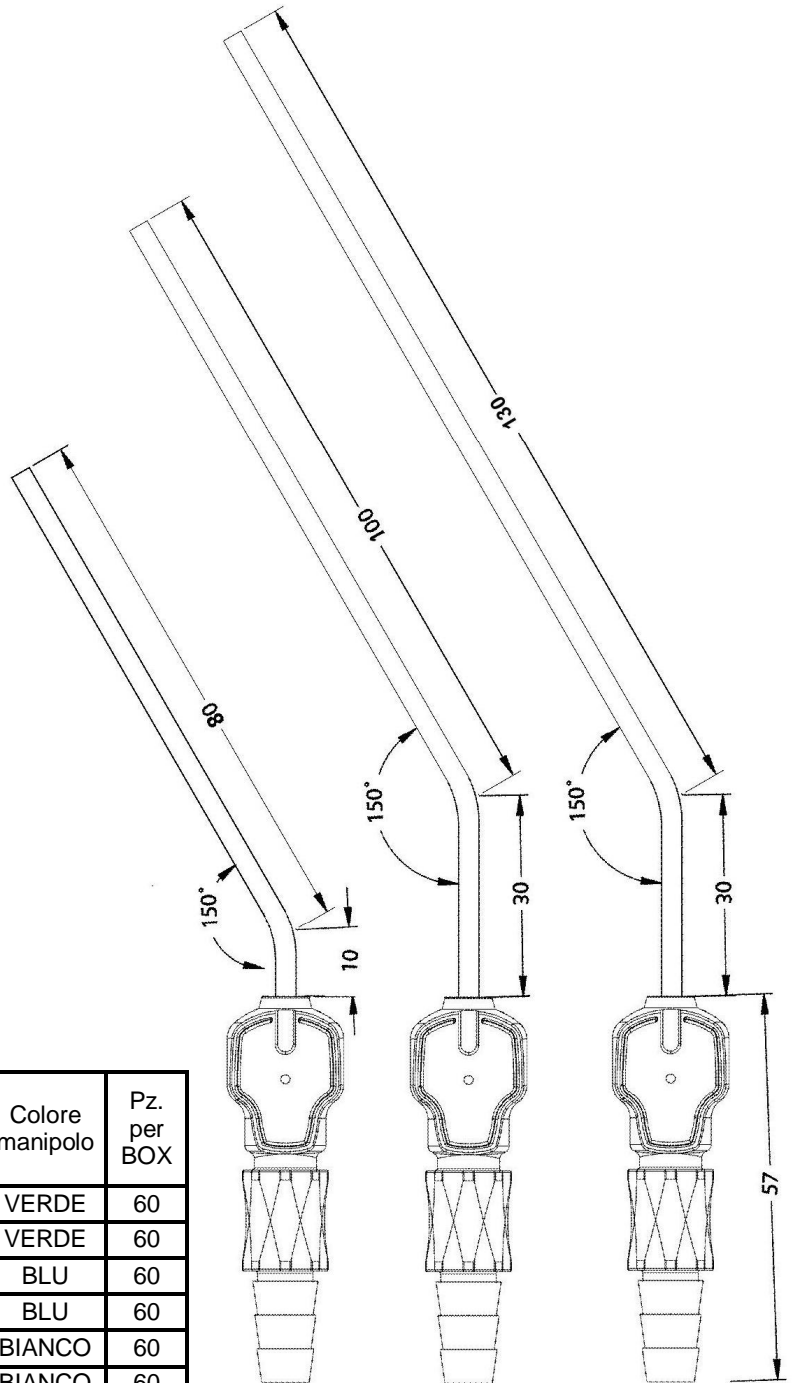

Codice	Diametro Interno mm.	Diametro Esterno mm.	CH	Lunghezza complessiva Cannula mm.	Colore manipoLO	Pz. per BOX
CSSR20L130	1,45	2,0	6	130	VERDE	60
CSSR20L160	1,45	2,0	6	160	VERDE	60
CSSR30L130	2,54	3,0	9	130	BLU	60
CSSR30L160	2,54	3,0	9	160	BLU	60
CSSR40L130	3,0	4,0	12	130	BIANCO	60
CSSR40L160	3,0	4,0	12	160	BIANCO	60

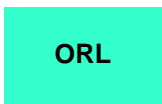

Distribuito da:

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 ; UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 | 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 | 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

