
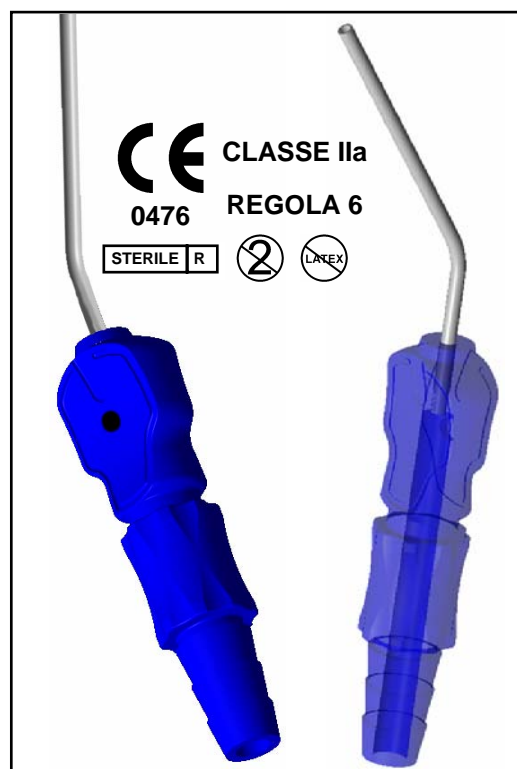


SIM MICRO CANNULA PER MICROLARINGOSCOPIA

CANNULA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO COMPLETA DI MANIPOLO CON CONTROLLO DI ASPIRAZIONE

- Il foro di controllo della aspirazione ha un **diametro di 1,5 mm.**, questo consente al chirurgo di avere una risposta molto più lenta. Quando il foro viene aperto, la diminuzione della aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo. Anche in caso di pressioni di aspirazione relativamente elevate queste cannule mantengono una bassa rumorosità
- Particolarmente adatte negli interventi di MICROLARINGOSCOPIA DIRETTA IN SOSPENSIONE
- Punta arrotondate atraumatiche
- Cannula prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contiene lattice
- Sterilizzata a raggi gamma
- Confezionata in busta singola sterile

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

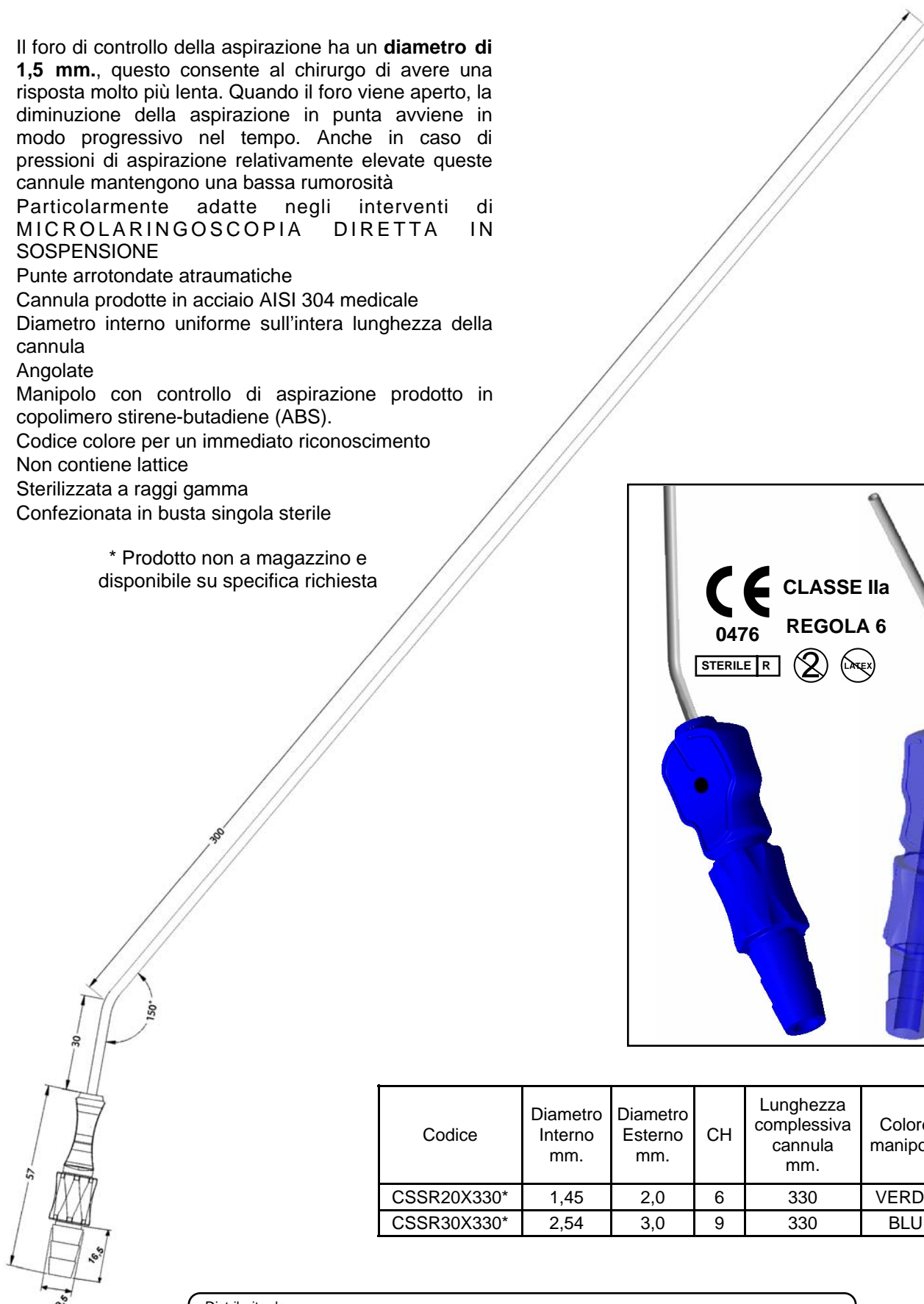

Codice	Diametro Interno mm.	Diametro Esterno mm.	CH	Lunghezza complessiva cannula mm.	Colore manipolo	Pz. per BOX
CSSR20X330*	1,45	2,0	6	330	VERDE	30
CSSR30X330*	2,54	3,0	9	330	BLU	30

ORL

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

