
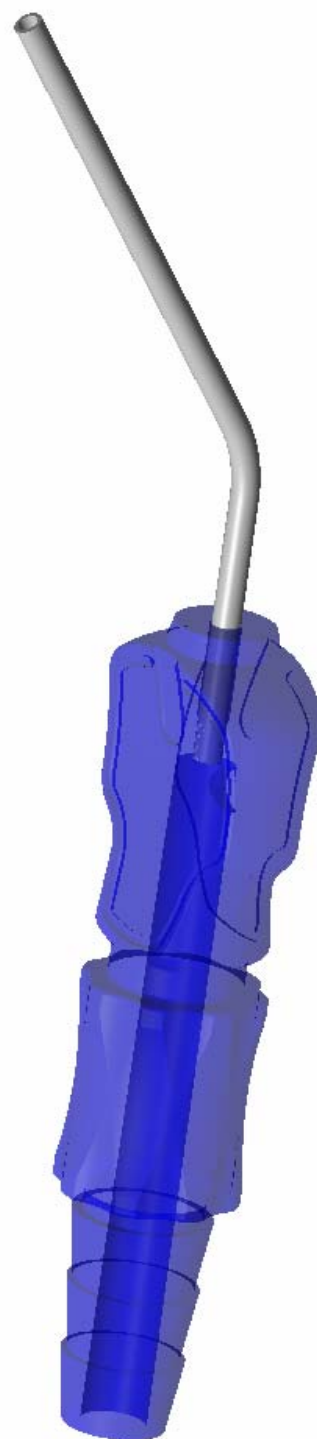


SIM MICRO CANNULA "SLOW REACTION"

CANNULE DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO

COMPLETE DI MANIPOLO CON CONTROLLO DI ASPIRAZIONE Ø 1,5 MM.

- Il foro di controllo della aspirazione ha un **diametro di 1,5 mm.**, questo consente al chirurgo di avere una risposta molto più lenta. Quando il foro viene aperto, la diminuzione della aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo. Anche in caso di pressioni di aspirazione relativamente elevate queste cannule mantengono una bassa rumorosità
- Particolarmente adatte negli interventi di Neuro Chirurgia, ORL, Maxillo Facciale, in Chirurgia dentale e più in generale in Micro Chirurgia
- Punte arrotondate atraumatiche
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula
- Angolate
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS).
- Codice colore per un immediato riconoscimento
- Non contengono lattice
- Sterilizzate a raggi gamma
- Confezionate in blister singoli sterili

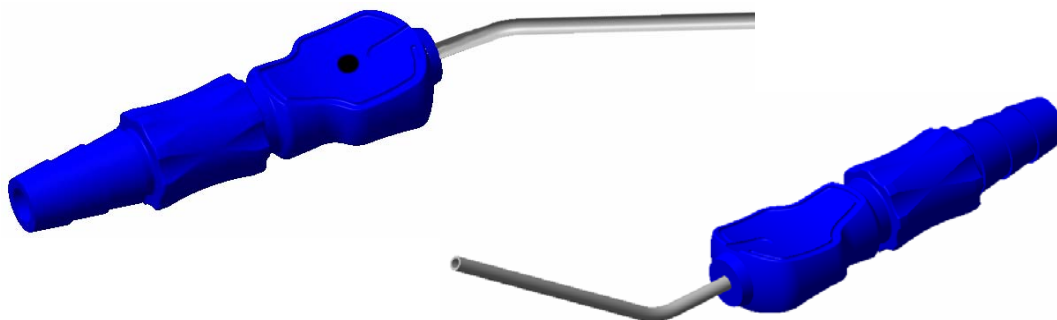

Revisione del 27.04.2010

Codice	Diametro Interno mm.	Diametro Esterno mm.	CH	Lunghezza complessiva Cannula mm.	Colore manipolo	Pz. per BOX
CSSR07X70	0,43	0,7	2	70	NERO	60
CSSR07X90	0,43	0,7	2	90	NERO	60
CSSR10X70	0,7	1	3	70	CREMA	60
CSSR10X90	0,7	1	3	90	CREMA	60
CSSR14X70	0,96	1,4	4	70	BIANCO	60
CSSR14X90	0,96	1,4	4	90	BIANCO	60
CSSR20X80	1,45	2,0	6	80	VERDE	60
CSSR20X130	1,45	2,0	6	130	VERDE	60
CSSR20X160	1,45	2,0	6	160	VERDE	60
CSSR30X80	2,54	3,0	9	80	BLU	60
CSSR30X130	2,54	3,0	9	130	BLU	60
CSSR30X160	2,54	3,0	9	160	BLU	60
CSSR40X80	3,0	4,0	12	80	BIANCO	60
CSSR40X130	3,0	4,0	12	130	BIANCO	60
CSSR40X160	3,0	4,0	12	160	BIANCO	60



STERILE R



Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

