


# Cannule di Guedel

## Scopo

Per mantenere libera la via orofaringea durante o in seguito ad anestesia generale e in pazienti non coscienti per altri motivi.

## Caratteristiche

- corretto anatomicamente per il paziente
- estremità morbida ed arrotondata che previene il danneggiamento dei tessuti
- la superficie atraumatica non può provocare lesioni ai tessuti
- blocco a morso fornisce l'accesso al catetere per l'aspirazione
- previene morsi alla lingua o l'occlusione delle vie aeree
- flessibile, non danneggia i denti durante il morso
- codifica dei colori, indica la massima dimensione del catetere di aspirazione
- Conforme allo standard ISO 5364:2001

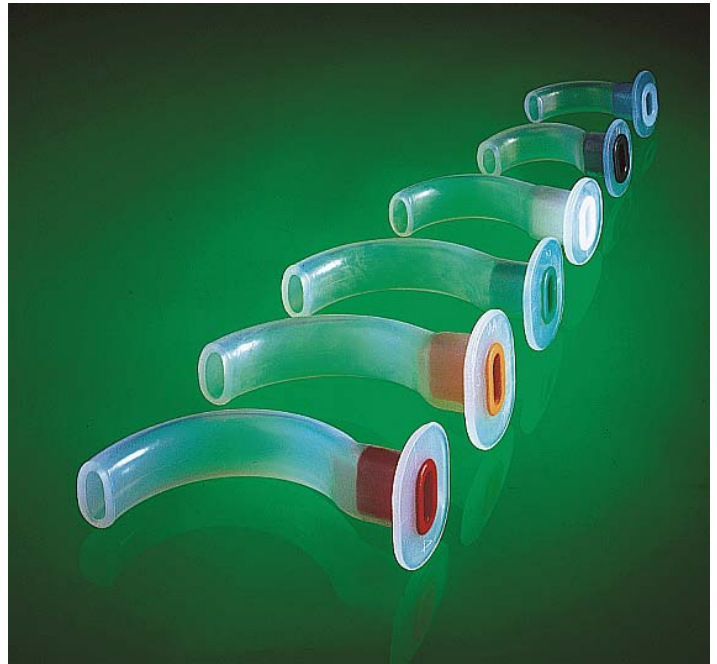

Revisione del 23.05.2008


## Specifiche


Corpo prodotto in acetato di etilvinile (EVA)  
 Sostegno interno del morso prodotto in polietilene  
 Confezionato in busta singola tipo "PEEL"  
 Sterilizzato con ossido di etilene (EO) o confezioni in bulk igienicamente pulite



CLASSE I

STERILE EO

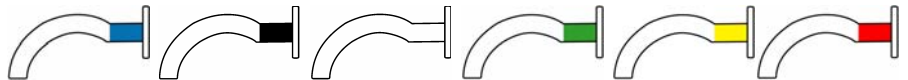

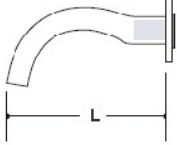
Lunghezza Misura secondo standard ISO Misura tradizionale		50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
		5 (00)	6 (0)	7 (1)	8 (2)	9 (3)	10 (4)
Confezione singola <b>sterile</b>		22024183* Box 900	22023183* Box 900	22019183* Box 300	22020183 Conf. 50 Box 300	22021183 Conf. 50 Box 300	22022183* Box 200
Confezione in bulk <b>non sterile</b>		22030573* Box 1500	22029573* Box 1500	22025573* Box 1500	220265732 Box 1500	22027573* Box 1500	22028573* Box 1500
Misura massima per catetere di suzione (CH)		08	10	12	14	16	18

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Anestesia e  
Rianimazione

Distribuito da:



Società Certificata  
 UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
 Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
 E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING