



New Safety Count System serie Maxi per Chirurgia Speciale




NPRSC 014

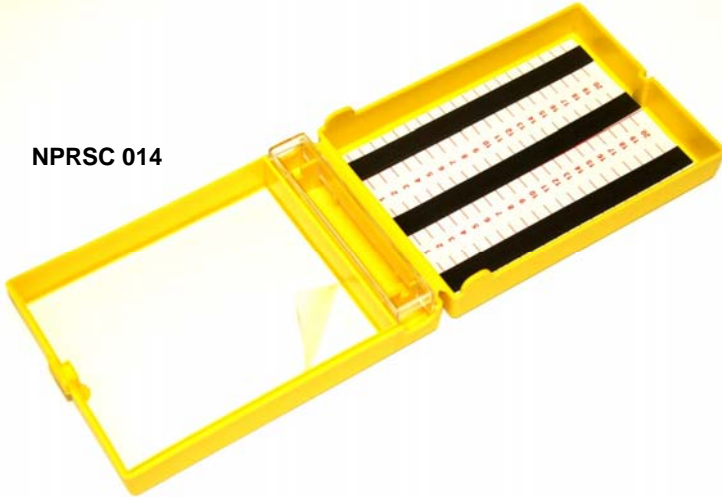

NPRSC 013

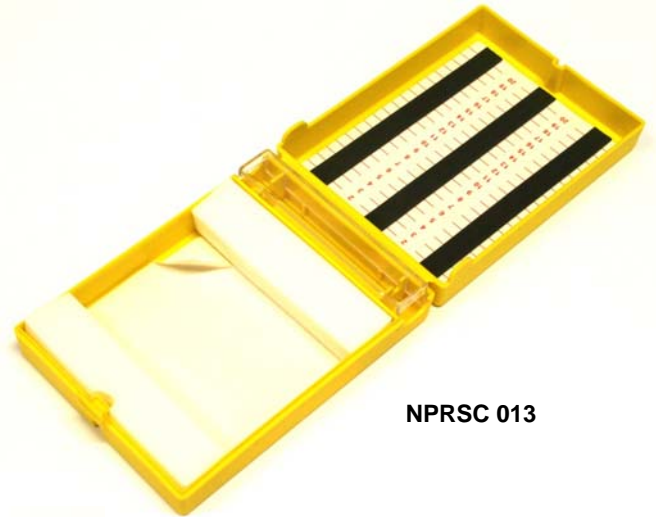

NPRSC 015

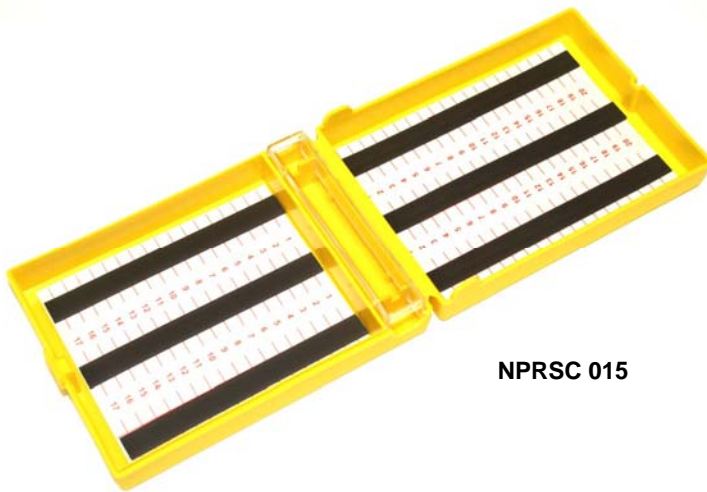

CLASSE IS
REGOLA 1



Revisione del 15.02.2010

SCOPO

Il New Safety Count System serie Maxi consente l'ideale eliminazione di lame da bisturi e aghi da sutura utilizzati in sala operatoria nel rispetto delle disposizioni ministeriali emanate con Decreto del 28 settembre 1990 - art. 2 - pubblicate sulla G.U. del 8-10-1990 - Serie generale - n.235. E' conforme ai requisiti indicati nel Decreto del 26 giugno 2000, n.219 - D.P.R 254-15.07.2003. Conforme allo standard BS 7320:1990 (*Specification for sharps containers*), alle linee guida OSHA 1910-1030 e alla raccomandazione n.2, luglio 2006 del Ministero della Salute "Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale chirurgico all'interno del sito chirurgico", Marcato CE0476 ai sensi della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE (D.lgs. 24.02.97 n. 46).

CARATTERISTICHE

Il New Safety Count System serie Maxi consente "la conta" di lame da bisturi e aghi utilizzati in sala operatoria. Risolve inoltre i problemi di sicurezza ed evita i rischi di contaminazione insiti nello smaltimento di rifiuti taglienti ed appuntiti di ogni genere.

- E' sicuro, semplice, facile da usare ed economico.
- Disponibile in 3 modelli per la massima scelta dell'utilizzatore.
- Confezione singola sterile in carta di grado medico più polipropilene (sterilizzata a raggi gamma)
- Box da 60 pz.
- Dimensioni da aperto: 26,5 cm. x 9,5 cm. x 2,5 cm.
- Dimensioni da chiuso: 13,2 cm. x 9,5 cm. x 3,5 cm.

Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it



Il doppio dispositivo di sgancio collocato su entrambi i lati del dispositivo, ne rende l'utilizzo semplice e sicuro sia per gli operatori destri che mancini

Fondo numerato per un conteggio preciso

Copertura trasparente in polistirene

Fondo adesivo a base acquosa in espanso polivinilico che trattiene i materiali contaminati

Strisce magnetiche oppure in espanso polivinilico con adesivo a base acquosa per trattenere gli aghi di sutura usati

Una volta inserito il bisturi nel sistema di sgancio, si spinge in basso e si estrae il manico

Sicura chiusura a scatto resistantissima contro l'apertura accidentale ma eventualmente riapribile utilizzando un manico da bisturi

Bordo interno prolungato per incrementare la sicurezza

Robusto contenitore in compound di polipropilene giallo antiforamento

Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it