


New Safety Count System

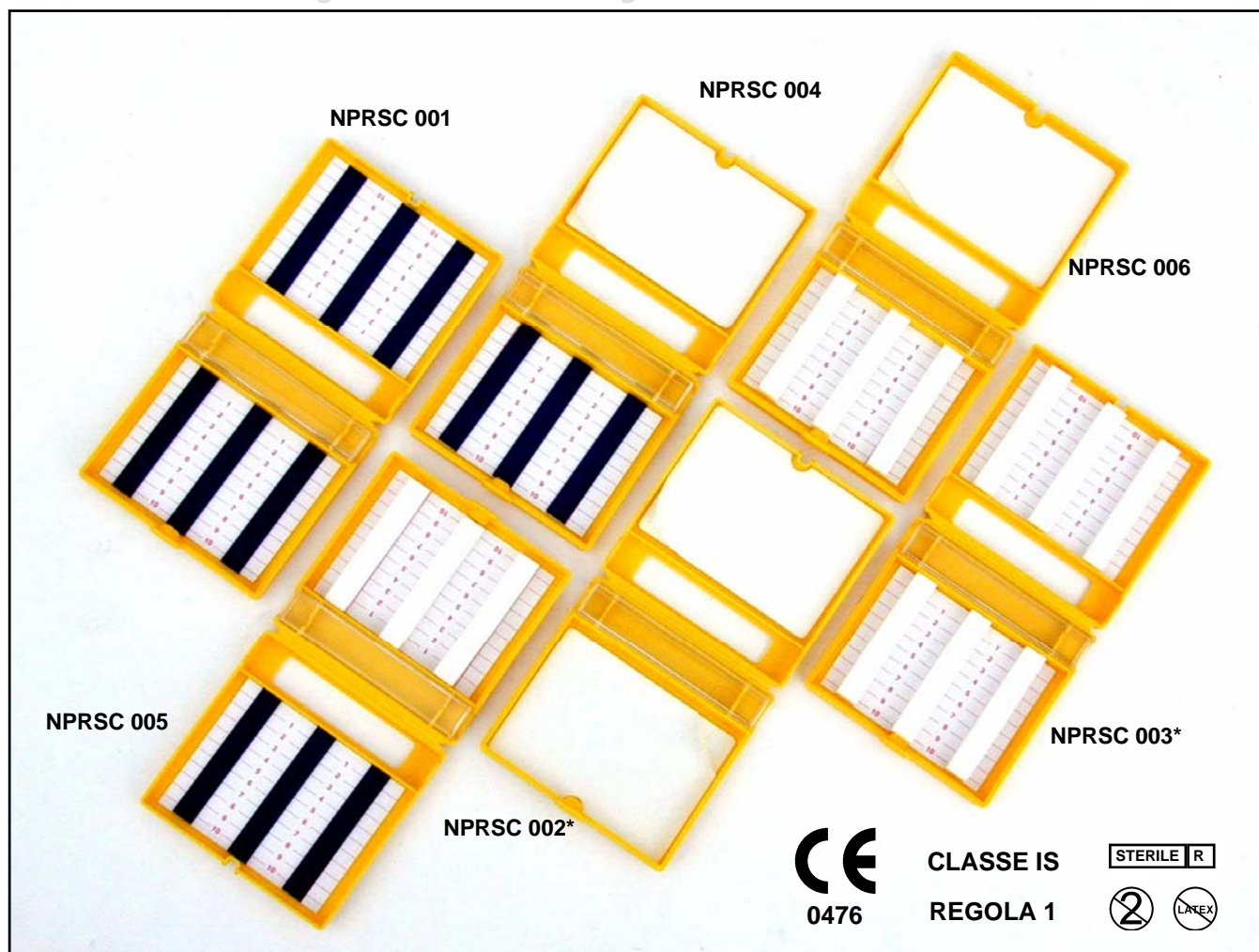

Revisione del 23.05.2008

SCOPO

Il New Safety Count System consente l'ideale eliminazione di lame da bisturi e aghi da sutura utilizzati in sala operatoria nel rispetto delle disposizioni ministeriali emanate con Decreto del 28 settembre 1990 - art. 2 - pubblicate sulla G.U. del 8-10-1990 - Serie generale - n.235. E' conforme ai requisiti indicati nel Decreto del 26 giugno 2000, n.219 - D.P.R 254-15.07.2003. Conforme allo standard BS 7320:1990 (*Specification for sharps containers*), alle linee guide OSHA 1910-1030 e alla raccomandazione n.2, luglio 2006 del Ministero della Salute "Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale chirurgico all'interno del sito chirurgico", Marcato CE0476 ai sensi della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE (D.lgs. 24.02.97 n. 46).

CARATTERISTICHE

Il New Safety Count System consente "la conta" di lame da bisturi e aghi utilizzati in sala operatoria. Risolve inoltre i problemi di sicurezza ed evita i rischi di contaminazione insiti nello smaltimento di rifiuti taglienti ed appuntiti di ogni genere.

- E' sicuro, semplice, facile da usare ed economico.
- Disponibile in 6 modelli per la massima scelta dell'utilizzatore.
- Confezione singola sterile in carta di grado medicale più polipropilene (sterilizzata a raggi gamma)
- Pratico dispenser contenente 18 blisters. (box da 6 dispenser = 108 blisters)
- Dimensioni da aperto: 18,5 cm. x 9,5 cm. x 2 cm.

*Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta








Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it



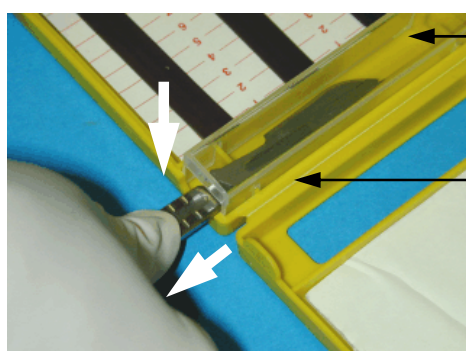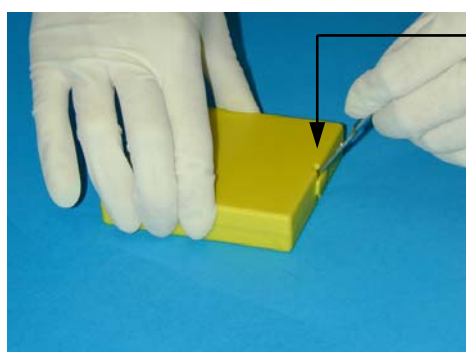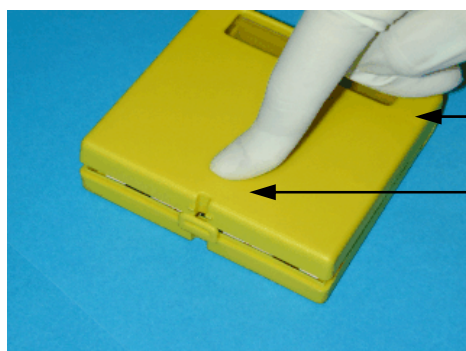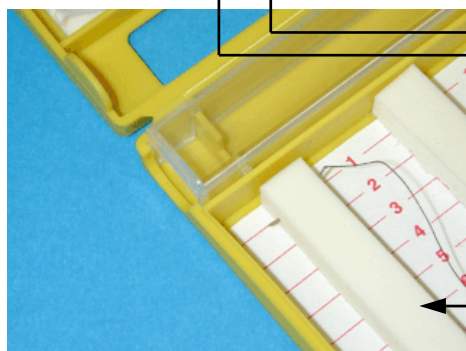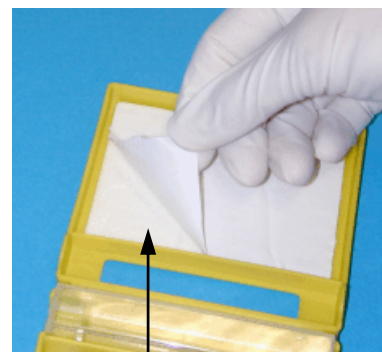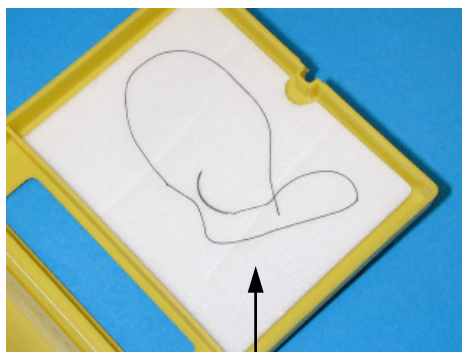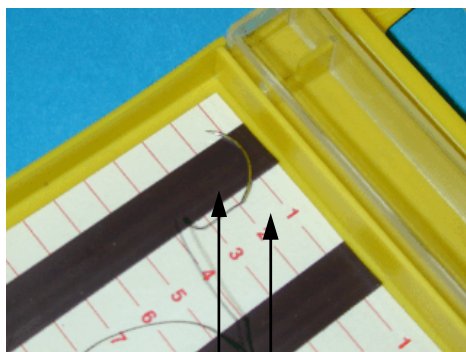

- Fondo adesivo a base acquosa in espanso polivinilico che trattiene i materiali contaminati
- Fondo numerato per un conteggio preciso
- Strisce magnetiche oppure in espanso polivinilico con adesivo a base acquosa per trattenere gli aghi di sutura usati
- Robusto contenitore in compound di polipropilene giallo antiforamento
- Sicura chiusura a scatto resistentissima contro l'apertura accidentale ma eventualmente riapribile utilizzando un manico da bisturi
- Il doppio dispositivo di sgancio collocato su entrambi i lati del dispositivo, ne rende l'utilizzo semplice e sicuro sia per gli operatori destri che mancini
- Copertura trasparente in polistirene
- Una volta inserito il bisturi nel sistema di sgancio, si spinge in basso e si estrae il manico
- Bordo interno prolungato per incrementare la sicurezza
- Pratico dispenser da 18 blister



Chirurgia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
 UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
 Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
 E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it