

Accessori per drenaggio Unoversal



Scopo

Per il drenaggio post-operatorio delle secrezioni delle ferite mediante una bassa pressione di vuoto.

Caratteristiche

- contenitore aspirante a soffietto da 400ml. graduato, determina una pressione di aspirazione iniziale di 95 mm/Hg
- contenitore aspirante a soffietto da 100ml. graduato, determina una pressione di aspirazione iniziale di 140 mm/Hg
- può essere svuotato
- fori di sospensione per un semplice fissaggio
- connettore da tagliare su misura e collegabile a tutti i drenaggi da CH 06 a CH 18 con un foro per drenaggio
- drenaggio radiopaco
- tacche a 20, 40 e 60 mm. dalla perforazione
- tubo di collegamento con clamp e adattatore per la connessione al soffietto
- disponibile con drenaggio tipo Ulmer ad aspirazione uniforme (2.5 volte più efficiente rispetto ad un drenaggio tipo Redon)

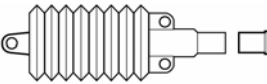
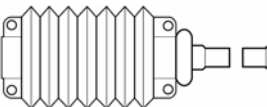
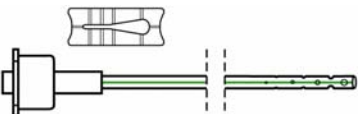



CLASSE I
REGOLA 1

STERILE EO



Revisione del 17.05.2010

Descrizione	Specifiche	Confezione e Box	Codice
 <p>Contenitore a soffietto Unoversal, in polietilene (PE), non contiene lattice, non invasivo, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)</p>	Circa 100 ml	Confezione singola sterile Conf. 25 pz / Box 100 pz.	13005183
 <p>Contenitore a soffietto Unoversal, in polietilene (PE), non contiene lattice, non invasivo, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)</p>	Circa 400 ml.	Confezione singola sterile Conf. 10 pz / Box 40 pz.	13006183
 <p>Drenaggio Ulmer con connettore per contenitore a soffietto Unoversal con eye-clamp, non contiene lattice, invasivo, classe IIa, Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade, durezza "Shore A" 69, lunghezza 500 mm., sterilizzato ad ossido di etilene (EO)</p>	<p>Lunghezza di perforazione del drenaggio</p> <p>CH 10 80 mm</p> <p>CH 12 100 mm</p> <p>CH 14 120 mm</p>	<p>Confezione singola sterile Box 400 pz.</p> <p>Confezione singola sterile Box 1200 pz.</p> <p>Confezione singola sterile Conf. 100 pz / Box 400 pz.</p>	<p>15095183*</p> <p>15096183*</p> <p>15097183</p>
 <p>Connettore in elastomero termoplastico per tubo di collegamento a un foro, non contiene lattice, non invasivo, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)</p>	CH 06-18	Confezione singola sterile Conf. 100 pz / Box 800 pz.	84053183

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Drenaggi

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it