

SECURO DRAIN

Sistema di drenaggio chiuso a bassa pressione con drenaggio in silicone J.Pratt

Descrizione

Il SECURO DRAIN è un sistema di drenaggio delle ferite ideato da J. Pratt per l'utilizzo nelle aree di chirurgia plastica, ricostruzione mammaria, neurochirurgia e addominale. Presenta i seguenti 6 vantaggi:

- 1. Alta compatibilità con il tessuto**
Il tubo di drenaggio in silicone minimizza il pericolo di aderenza ai tessuti e necrosi. Questo facilita la cicatrizzazione della ferita.
- 2. Sistema anti-infezione**
Il sistema di drenaggio a circuito chiuso consente di prevenire l'insorgere di infezioni. Una infezione retrograda in espansione sarà minimizzata grazie alla valvola fra il tubo di drenaggio e il palloncino. Inoltre, una continua, debole, pressione è sempre presente (circa 40/20 mm Hg).
- 3. Radiopaco**
Una linea radiopaca indica la posizione del drenaggio. Il controllo della posizione del drenaggio tramite raggi X risulta essere estremamente facilitato.
- 4. Minori ostruzioni**
Una costruzione speciale del lume e la composizione dell'elastomero in silicone riduce il problema di adesione fibrinosa o della ostruzione dovuta a grumi ematici.
- 5. Trasportabile**
La deospedalizzazione anticipata del paziente è facilitata, poiché il sistema di drenaggio è molto leggero.
- 6. Forma piatta**
Poiché il tubo di drenaggio è piatto, l'inserimento anche nei campi ristretti (ad esempio: spazio subdurale nelle procedure chirurgiche neurologiche o il viso nella chirurgia plastica) sarà meno traumatica, ma efficace e semplice. Una costruzione appropriata delle pareti del tubo mantiene aperto il lume anche in aspirazione.



Revisione del 26.09.2006




0482

STERILE EO



CLASSE IIa

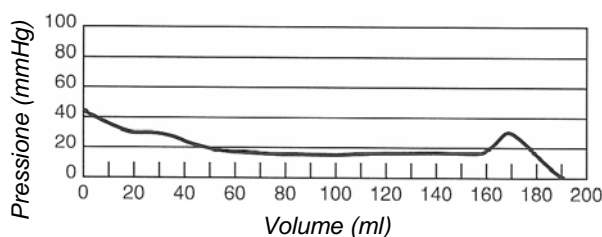

Specifiche:

Tubo di drenaggio prodotto in silicone e solfato di bario radiopaco Lunghezza: 20 cm.

Tubo di prolunga prodotto in silicone: Lunghezza: 60 cm.

Palloncini da 150 e 400 cc., prodotti in silicone, apertura palloncino in polipropilene, valvola antireflusso palloncino in silicone.

Confezione in busta di carta/polietilene

Prodotto sterile monouso

	Codice:	Misura	Lunghezza drenaggio	Lunghezza della perforazione	Imballo Pz./Box
Securo Drain	01.3307	7 x 3 mm.	20 cm.	3/4 (15 cm.)	20
	01.3310	10 x 4 mm.	20 cm.	3/4 (15 cm.)	20
	01.3404	4 x 1,5 mm.	20 cm.	Completo 20 cm.	20
	01.3407	7 x 3 mm.	20 cm.	Completo 20 cm.	20
	01.3410	10 x 4 mm.	20 cm.	Completo 20 cm.	20
Palloncino	01.3300	150 cc.	-	-	5
	01.3303	400 cc.	-	-	2

Drenaggi

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it