
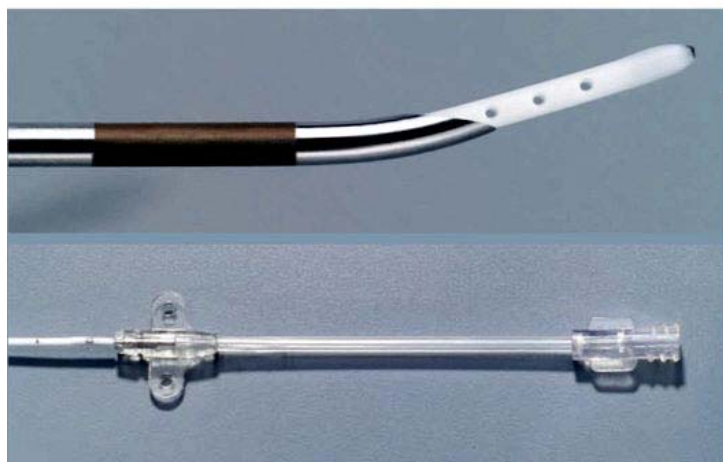


# Catetere lombare in silicone radiopaco con connettore di sicurezza

Il catetere lombare consente un continuo drenaggio ed un più accurato controllo della pressione del fluido spinale.

Il set del catetere lombare è progettato specificamente per le necessità delle procedure neurochirurgiche.

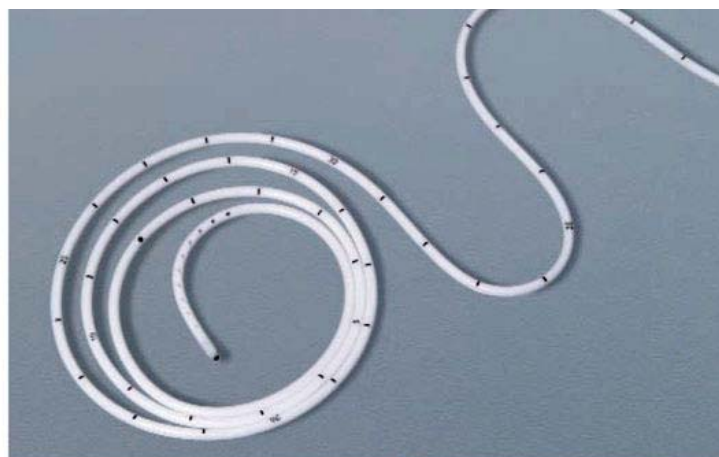

STERILE EO 0482



CLASSE III  
REGOLA 7

## Caratteristiche

- Catetere prodotto in morbido silicone radiopaco
- Antischiacciamento
- Tacche di posizionamento ad intervalli di 1 cm. ed indicazioni numeriche della posizione ad intervalli di 5 cm.
- Filo guida rivestito con materiale idrofilo
- Dotato di dispositivo di fissaggio tipo butterfly per il fissaggio diretto sulla pelle del paziente

Revisione del 26.09.2006

CODICE	Catetere lombare	Lunghezza cm.	Filo guida	Dimensioni Diametro interno / Diametro esterno	Cannula di Touhy	Confezionamento
01.3700-1	Con connettore di sicurezza	80	0.018" x 90 cm.	CH 4.5 0,7 mm / 1,5 mm.	14G	1 pz. per scatola
01.37415	Con sistema di drenaggio inclusa camera di misurazione (100 ml.) con sistema di fissaggio a Dacron-Velcro e sacca di raccolta	80	0.018" x 90 cm.	CH 4.5 0,7 mm / 1,5 mm.	14G	1 pz. per scatola

## Dati tecnici:

Catetere Lombare 4.5F  
Lunghezza: 80 cm  
Diametro interno: 0.7 mm  
Diametro esterno: 1.5 mm  
Marcatura lunghezza: ogni 5 cm. (grafite impregnata di silicone)  
Numero di fori: 20 fori complessivi disposti su 2 file da 10 fori l'una  
Vita del dispositivo sterile: 3 anni

## Materiali:

Catetere: silicone, 100% radiopaco (solfato di bario)  
Cannula Touhy : ST/ST, PC  
Filo guida: ST/ST, PTFE, rivestimento idrofilo  
Connettore catetere LL: ST/ST, PUR, PVC

## Imballo:

Blister + Busta: PETG, PETG, Tyvek, PET

Neurochirurgia

Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

