

Instrument Guards - Cappucci protettivi

SCOPO

Cappucci protettivi per le delicate punte degli strumenti chirurgici durante la loro sterilizzazione e manipolazione.

CARATTERISTICHE

- Monouso
- Prodotti in materiale plastico atossico e disponibili in diverse misure, forme e colori
- Non sono sterili ma confezionati asetticamente
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene.
- Disponibili nelle versioni "trasparente" per consentire l'ispezione visiva dello strumento, "con colore pieno" per consentire una facile identificazione della misura dello strumento, "con colore trasparente" per consentire sia l'identificazione della misura che l'ispezione visiva dello strumento
- I cappucci protettivi "con colore pieno" sono radiopachi
- Disponibili nelle versioni "non forato" e "forato" (i fori consentono la circolazione dell'aria ed evitano la formazione di umidità tra cappuccio e strumento)




CLASSE I
REGOLA 1



Revisione del 30.03.2010

Dimensioni (mm.)	Confezione	Codice	Colore	Modello	Codice	Colore	Modello	Codice	Colore	Modello
1,6 x 19	100 pz.	09-1-001	Bianco pieno	Non forato	09-2-001	Trasparente	Non forato	09-3-001	Bianco trasparente	Non forato
2,0 x 19	100 pz.	09-1-002	Blu pieno	Non forato	09-2-002	Trasparente	Non forato	09-3-002	Blu trasparente	Non forato
2,8 x 19	100 pz.	09-1-003	Verde pieno	Non forato	09-2-003	Trasparente	Non forato	09-3-003	Verde trasparente	Non forato
3,2 x 25,4	100 pz.	09-1-004	Rosso pieno	Non forato	09-2-004	Trasparente	Non forato	09-3-004	Rosso trasparente	Non forato
5 x 25	100 pz.	09-1-005	Giallo pieno	Non forato	09-2-005	Trasparente	Non forato	09-3-005	Giallo trasparente	Non forato
10 x 19	100 pz.	09-1-006	Porpora pieno	Non forato	09-2-006	Trasparente	Non forato	09-3-006	Porpora trasparente	Non forato
2 x 9 x 25	100 pz.	09-1-007	Arancione pieno	Non forato	09-2-007	Trasparente	Non forato	09-3-007	Arancione trasparente	Non forato
2 x 16 x 25	100 pz.	09-1-008	Marrone pieno	Non forato	09-2-008	Trasparente	Non forato	09-3-008	Marrone trasparente	Non forato
3 x 25 x 25	100 pz.	09-1-009	Nero pieno	Non forato	09-2-009	Trasparente	Non forato	09-3-009	Nero trasparente	Non forato
Assortite	100 pz.	09-1-010	Assortiti pieni	Non forati	09-2-010	Trasparente	Non forati	09-3-010	Assortiti trasparenti	Non forati
1,6 x 19	100 pz.	09-1-011	Bianco pieno	Forato	09-2-011	Trasparente	Forato	09-3-011	Bianco trasparente	Forato
2 x 19	100 pz.	09-1-012	Blu pieno	Forato	09-2-012	Trasparente	Forato	09-3-012	Blu trasparente	Forato
2,8 x 19	100 pz.	09-1-013	Verde pieno	Forato	09-2-013	Trasparente	Forato	09-3-013	Verde trasparente	Forato
3,2 x 25,4	100 pz.	09-1-014	Rosso pieno	Forato	09-2-014	Trasparente	Forato	09-3-014	Rosso trasparente	Forato
5 x 25	100 pz.	09-1-015	Giallo pieno	Forato	09-2-015	Trasparente	Forato	09-3-015	Giallo trasparente	Forato
10 x 19	100 pz.	09-1-016	Porpora pieno	Forato	09-2-016	Trasparente	Forato	09-3-016	Porpora trasparente	Forato
2 x 9 x 25	100 pz.	09-1-017	Arancione pieno	Forato	09-2-017	Trasparente	Forato	09-3-017	Arancione trasparente	Forato
2 x 16 x 25	100 pz.	09-1-018	Marrone pieno	Forato	09-2-018	Trasparente	Forato	09-3-018	Marrone trasparente	Forato
3 x 25 x 25	100 pz.	09-1-019	Nero pieno	Forato	09-2-019	Trasparente	Forato	09-3-019	Nero trasparente	Forato
Assortite	100 pz.	09-1-020	Assortiti pieni	Forati	09-2-020	Trasparente	Forati	09-3-020	Assortiti trasparenti	Forati

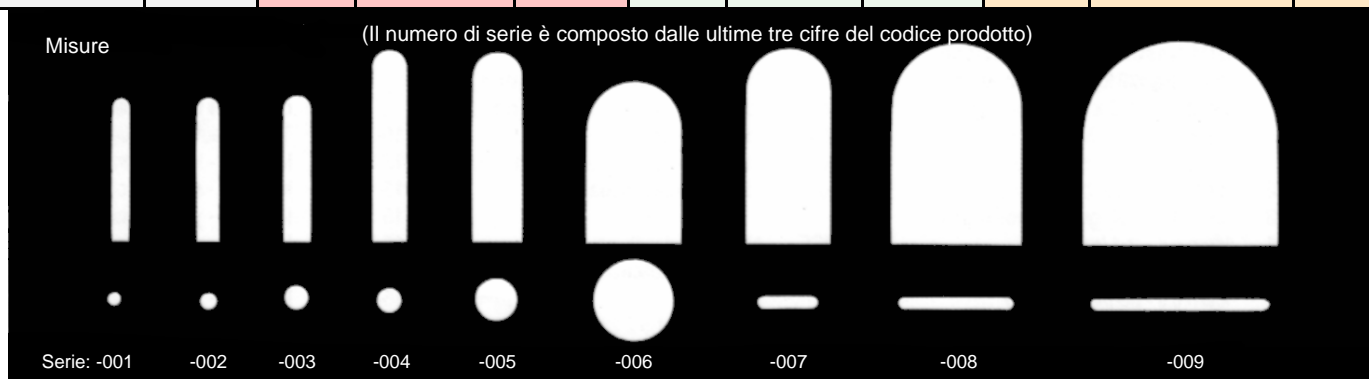

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.®
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it