

Catetere per aspirazione bronchiale curvo con cono

Scopo

Per la rimozione delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere.
- Massimo effetto di aspirazione.
- Punta smussata, minori traumi.
- Punta distale curva per una facile introduzione nel bronco sinistro.
- Nessuna riduzione dell'effetto aspirante grazie alla forma curva della punta distale.
- Trattamento "frozen" della superficie facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale.
- Solo per uso con dispositivi che consentono un controllo separato dell'aspirazione.
- Cono con codice colore per rapida identificazione della misura.
- Due piccoli fori laterali circolari riducono i rischi di adesione alla mucosa.
- Elevata efficienza a livelli di aspirazione ridotti.

Tipo Mully


- Shore A78.

Tipo Optimal

- Shore A64.




CLASSE I
REGOLA 5
STERILE EO

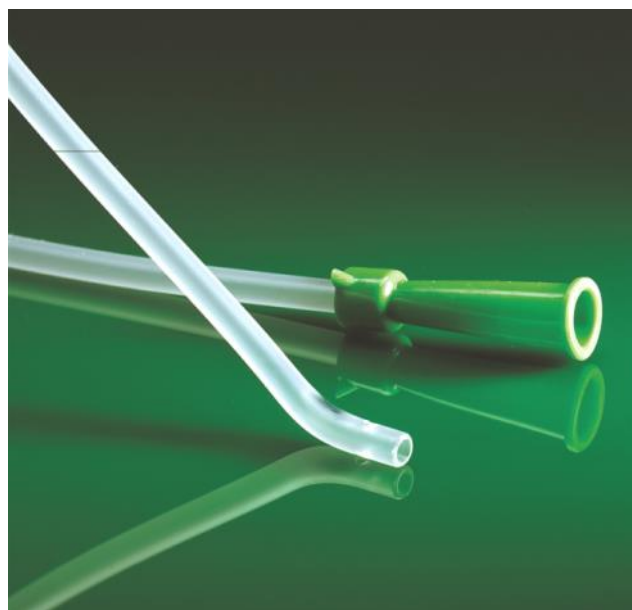

Specifiche

- Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice.
- Invasivo.



	Shore A durezza	Lung. senza cono, mm	Diametro esterno del tubo, mm						
			2.0 CH 06	2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18
 Mully curvo 2 fori laterali	78	490	0800118X* Box 2000	0800318X* Box 2000	0800518X* Box 2000	0800718X* Box 1600	0800918X* Box 1600	0801118X* Box 1600	0801418X* Box 1600
Optimal curvo 2 fori laterali	64	560				0802318X* Box 1600	0802518X* Box 2000	0802718X* Box 1600	

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

136

Revisione del 12.06.2018