

# Catetere per aspirazione bronchiale retto con Vacutip

## Scopo

Per la rimozione controllata delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

## Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere.
- Massimo effetto di aspirazione.
- Minori traumi.
- Connettore ergonomico integrato.
- Trattamento "frozen" della superficie facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale e di tracheotomia.

## Vacutip Vacuum Control

- Connettore trasparente per una agevole osservazione delle secrezioni.
- Massimo controllo dell'aspirazione.
- Codice colore per una rapida identificazione del CH.
- Nessun rischio di contaminazione del dito.

## Mully retto

- Alta efficienza a basse pressioni di aspirazione.
- Due piccoli fori laterali circolari riducono il rischio di adesione alla mucosa.
- Shore A78.

## Optimal

- Stesse caratteristiche del Mully ma più soffice, Shore A64.


## Specifiche

- Vacutip: stirene acrilonitrile.
- Mully/Optimal: cloruro di polivinile (PVC).
- Confezione in busta singola tipo "peel"
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice. Invasivo.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).

Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

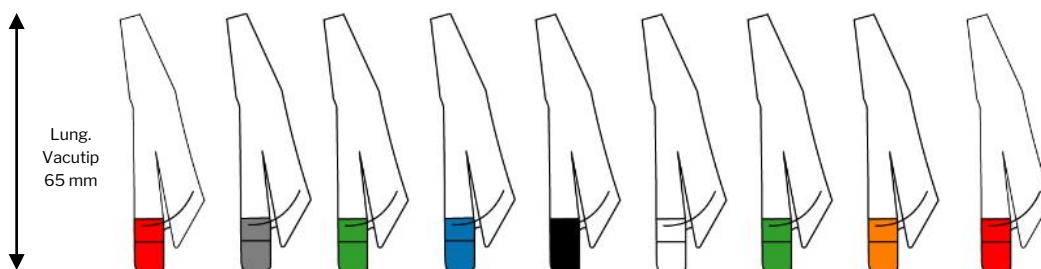


	Shore A durezza	Lung. senza Vacutip, mm	Diametro esterno del tubo, mm									
			1.3 CH 04	1.7 CH 05	2.0 CH 06	2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	
Mully retto	78	535						0702918X* Box 1200	0703118X* Box 1200	0703318X* Box 1200	0703518X* Box 1200	0703718X* Box 1200
Mully retto - Uno metric	78	285	1203618X* Box 1200	1203718X* Box 1200	1203818X* Box 1200	1204318X* Box 1200	1204618X* Box 1200					
Optimal retto	64	535						0704318X Conf. 100 Box 600	0704518X Conf. 100 Box 600	0704718X Conf. 100 Box 600	0704918X Conf. 100 Box 600	0705018X Conf. 100 Box 600



Il catetere Vacutip UnoMetric graduato in cm offre una maggiore protezione.

Vacutip UnoMetric per neonati consente un'introduzione precisa del catetere. La scala graduata in unità di 1 centimetro inizia a 5 centimetri dalla punta distale consentendo un'introduzione uniforme in caso di applicazioni ripetute. Viene quindi ridotto al minimo il rischio di perforazione del tessuto polmonare.

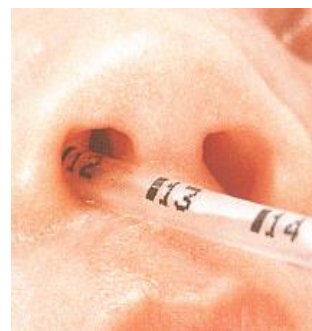

## Precauzioni

Il catetere di aspirazione può essere introdotto nel cavo endotracheale fino ad un 1 cm dal termine del cavo stesso e non oltre.

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it