

Catetere lombare

in silicone radiopaco con connettore di sicurezza

Il catetere lombare consente un continuo drenaggio ed un più accurato controllo della pressione del fluido spinale.



Il set del catetere lombare è progettato specificamente per le necessità delle procedure neurochirurgiche.



CLASSE III
REGOLA 7



CODICE CND: N020199

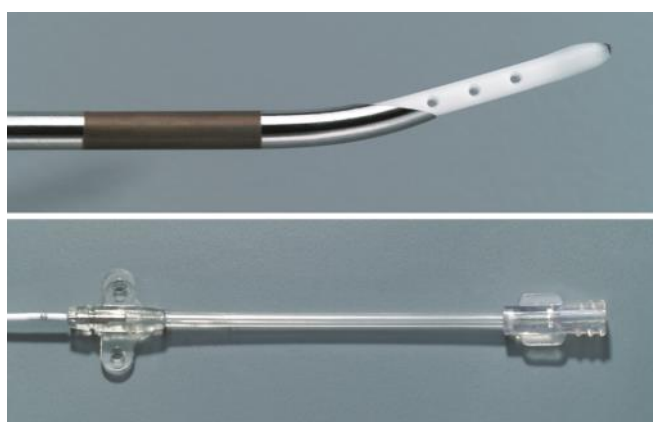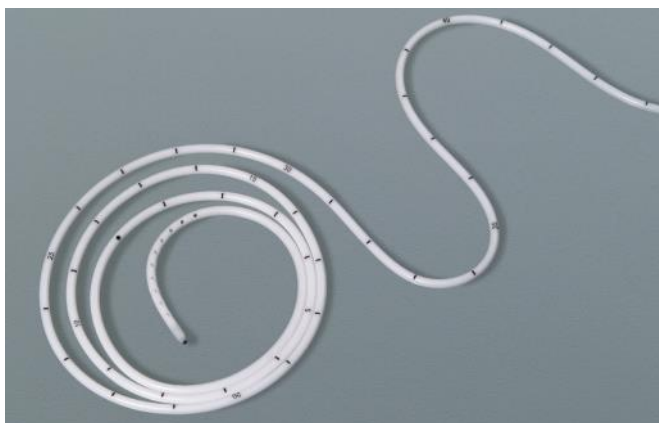

Caratteristiche

- Catetere prodotto in morbido silicone radiopaco.
- Antischacciamento.
- Tacche di posizionamento ad intervalli di 1 cm ed indicazioni numeriche della posizione ad intervalli di 5 cm.
- Filo guida rivestito con materiale idrofilo.
- Dotato di dispositivo di fissaggio tipo butterfly per il fissaggio diretto sulla pelle del paziente.

CODICE	Catetere lombare	Lunghezza cm	Filo guida	Dimensioni Ø int. / Ø est.	Cannula di Touhy	Confezione
01.3700-1*	Con connettore di sicurezza	80	0.018" x 90 cm	CH 4,5 0,7 mm / 1,5 mm	14G	1 pz. / scatola
01.37415*	Con sistema di drenaggio inclusa camera di misurazione (100 ml) con sistema di fissaggio a Dacron-Velcro e sacca di raccolta	80	0.018" x 90 cm	CH 4,5 0,7 mm / 1,5 mm	14G	1 pz. / scatola

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Dati tecnici

- Catetere lombare 4,5 F.
- Lunghezza 80 cm.
- Diametro interno 0,7 mm, diametro esterno 1,5 mm.
- Marcatura lunghezza: ogni 5 cm (grafite impregnata di silicone).
- Numero di fori: 20 fori complessivi disposti su 2 file da 10 fori l'una.
- Vita del dispositivo sterile: 3 anni.

Materiali

- Catetere: silicone 100% radiopaco (solfato di bario).
- Cannula Touhy: ST/ST, PC.
- Filo guida: ST/ST, PTFE, rivestimento idrofilo.
- Connettore catetere LL: ST/ST, PUR, PVC.
- Imballo (blister + busta): PETG, PETG, Tyvek, PET.

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

67

Revisione del 12.06.2018