

Disarp

Retratore addominale assorbente monouso

Scopo

Per uso intraoperatorio per la retrazione addominale (es. nelle laparotomie) e per l'assorbimento del sangue nel campo operatorio.

Caratteristiche

Regolabile ed atraumatico

- può essere piegato nella posizione desiderata a seconda del tipo di intervento
- facile da inserire
- non danneggia i tessuti

Posizione stabile

- sostituisce il retrattore e/o la pezza laparotomica a seconda del tipo di intervento
- contiene costantemente i visceri per rendere libero il campo chirurgico
- consente all'aiuto o all'assistente di partecipare più attivamente all'intervento

Assorbente e radiopaco

- limita l'uso, durante l'intervento, di garze laparotomiche e tamponi
- può essere strizzato e successivamente riposizionato
- è antistatico quando viene inumidito in soluzioni saline prima dell'uso

Monouso

- nessun rischio di infezioni crociate



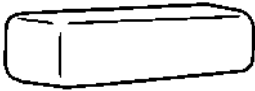
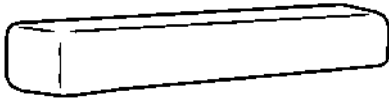
CLASSE IIa
REGOLA 6

STERILE EO



Specifiche

- Copertura in tessuto poliammidico medical-grade.
- Tampone prodotto in poliuretano medical-grade.
- Stecca prodotta in acciaio inossidabile flessibile.
- Capacità assorbente: disarp lungo circa 200 ml, disarp corto circa 100 ml.
- Due etichette di controllo.
- Confezione doppia. Sterilizzazione ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice. Invasivo.

Modello	Misura, mm	Codice	Box
	250 x 50 x 50	3404318X	Box 25 pz.
	450 x 50 x 50	3404418X	Box 25 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

12

Revisione del 12.06.2018