

Sistema di drenaggio scanalato a basso vuoto

Descrizione

Il tubo di drenaggio è munito di 4 canali laterali che ne potenziano la capacità drenante.

Il materiale in silicone e lo speciale design a 4 canali permettono il drenaggio anche quando un singolo canale è ostruito.

Caratteristiche


- La superficie drenante aumenta di 7 volte rispetto ai drenaggi convenzionali muniti di fori.
- La capacità drenante è potenziata in modo significativo.
- I canali di drenaggio multipli evitano il rischio di occlusione.
- Grazie al design a 4 canali la rimozione del drenaggio è meno traumatica.

Specifiche


- Drenaggio: silicone radiopaco.
- Trocar: acciaio inossidabile.
- Confezionamento: doppia busta, sterile.



Drenaggio convenzionale - rendimento: 50%

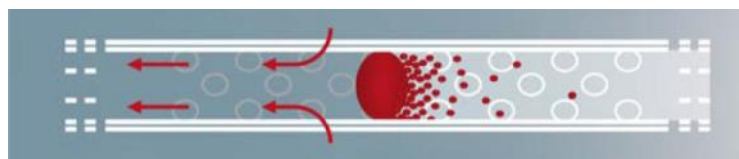

Drenaggio scanalato - rendimento: 87,5%

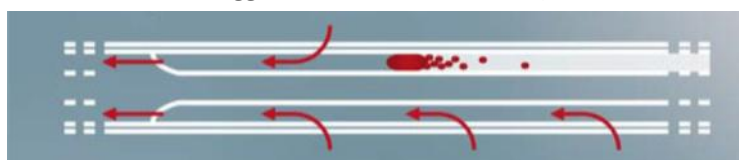

CLASSE IIa
REGOLA 7

STERILE EO



Drenaggio SecuroPlus	REF	Misura	Lunghezza	Lunghezza	Box
Drenaggio piatto, 3/4 scanalato, con trocar	01.5307	7 mm	110 cm	21 cm	15 pz.
	01.5310	10 mm	110 cm	21 cm	15 pz.
Drenaggio piatto, 4/4 scanalato, con trocar	01.5407*	7 mm	100 cm	20 cm	15 pz.
	01.5410*	10 mm	100 cm	20 cm	15 pz.
Drenaggio rotondo scanalato con trocar e adattatore	01.5510	10 F	110 cm	20 cm	15 pz.
	01.5515	15 F	120 cm	30 cm	15 pz.
	01.5519	19 F	120 cm	30 cm	10 pz.
Drenaggio rotondo scanalato con adattatore	01.5610	10 F	110 cm	20 cm	15 pz.
	01.5615	15 F	120 cm	30 cm	15 pz.
	01.5619	19 F	120 cm	30 cm	10 pz.
	01.5624	24 F	120 cm	30 cm	10 pz.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

46

Revisione del 28.03.2017