

Set per drenaggio Universal a bassa pressione di vuoto

Scopo

Per il drenaggio post-operatorio delle secrezioni delle ferite mediante bassa pressione di vuoto.

Caratteristiche

- Contenitore aspirante a soffietto da 400ml graduato determina una pressione di aspirazione iniziale di 95 mm/Hg.
- Connettore da tagliare su misura e collegabile a tutti i drenaggi da CH 06 a CH 18 con un foro per drenaggio.
- Set pronto per l'uso (soffietto, drenaggio e ago di trasfissione).
- Drenaggio radiopaco.
- Tacche a 20, 40 e 60 mm dalla perforazione.
- Tubo di collegamento con clamp e adattatore per la connessione al soffietto.
- Fori di sospensione per un semplice fissaggio.
- Disponibile con drenaggio tipo Ulmer ad aspirazione uniforme (2.5 volte più efficiente rispetto ad un drenaggio tipo Redon).



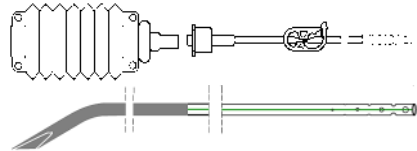
Specifiche

- Soffietto Universal prodotto in polietilene (PE) dotato di guarnizione esterna in lattice.
- Tubo di collegamento con clamp e adattatore, prodotto in cloruro di polivinile (PVC), durezza "Shore A" 74. Lunghezza 1250 mm. Diametro interno/esterno 3,5/6,0 mm.
- Drenaggio (Ulmer) prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade, durezza "Shore A" 69. Lunghezza 500 mm.
- Ago guida in acciaio pieno.
- Connettore in elastomero termoplastico.
- Invasivo.
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Confezionato in doppia busta tipo "peel".



CLASSE IIa
REGOLA 7



Confezione da 10 pz.	Lunghezza di perforazione del drenaggio, mm	Diametro interno/esterno, mm		
		2,0/3,3 CH 10 Codice	2,2/4,0 CH 12 Codice	2,4/4,7 CH 14 Codice
 <p>Con ago in acciaio pieno e drenaggio tipo Ulmer</p>	80	1302718X Box 40 pz.		
	100		1302818X Box 40 pz.	
	120			1302918X Box 40 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è influente nella definizione del codice.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

54

Revisione del 12.06.2018

Accessori per drenaggio Unoversal

Scopo

Per il drenaggio post-operatorio delle secrezioni delle ferite mediante bassa pressione di vuoto.

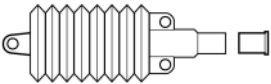
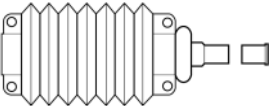
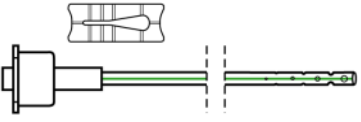

Caratteristiche

- Contenitore aspirante a soffietto da 400ml graduato determina una pressione di aspirazione iniziale di 95 mm/Hg.
- Contenitore aspirante a soffietto da 100ml graduato determina una pressione di aspirazione iniziale di 140 mm/Hg.
- Può essere svuotato.
- Fori di sospensione per un semplice fissaggio.
- Connettore da tagliare su misura e collegabile a tutti i drenaggi da CH 06 a CH 18 con un foro per drenaggio.
- Drenaggio radiopaco.
- Tacche a 20, 40 e 60 mm dalla perforazione.
- Tubo di collegamento con clamp e adattatore per la connessione al soffietto.
- Disponibile con drenaggio tipo Ulmer ad aspirazione uniforme (2,5 volte più efficiente rispetto ad un drenaggio tipo Redon).



CLASSE I
REGOLA 1



Descrizione	Specifiche	Confezione e box	Codice
Contenitore a soffietto Unoversal in polietilene (PE), non contiene lattice, non invasivo, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)	 Circa 100 ml	Confezione singola sterile Box 100 pz.	1300518X*
Contenitore a soffietto Unoversal in polietilene (PE), non contiene lattice, non invasivo, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)	 Circa 400 ml	Confezione singola sterile Conf. 10 pz. / Box 40 pz.	1300618X
Drenaggio Ulmer con connettore per contenitore a soffietto Unoversal con eye-clamp, non contiene lattice, invasivo, classe IIa, prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade, durezza "Shore A" 69, lunghezza 500 mm, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)	 Lunghezza di perforazione del drenaggio CH 10 80 mm CH 12 100 mm CH 14 120 mm	Confezione singola sterile Box 400 pz. Confezione singola sterile Box 1200 pz. Confezione singola sterile Box 1200 pz.	1509518X* 1509618X* 1509718X*
Connettore in elastomero termoplastico per tubo di collegamento a un foro, non contiene lattice, non invasivo, sterilizzato ad ossido di etilene (EO)	 CH 06-18	Confezione singola sterile Conf. 100 pz. / Box 800 pz.	8405318X

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

55

Revisione del 12.06.2018