
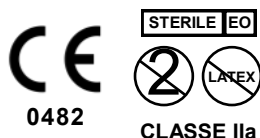


Securo Drain

Sistema di drenaggio chiuso a bassa pressione con drenaggio in silicone J.Pratt

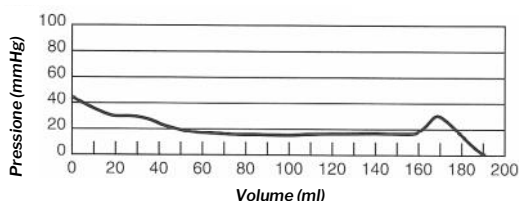

Descrizione

Il Securo Drain è un sistema di drenaggio delle ferite ideato da J. Pratt per l'utilizzo nelle aree di chirurgia plastica, ricostruzione mammaria, neurochirurgia e chirurgia addominale. Presenta i seguenti 6 vantaggi:

- Alta compatibilità con il tessuto.**
 Il tubo di drenaggio in silicone minimizza il pericolo di aderenza ai tessuti e necrosi. Questo facilita la cicatrizzazione della ferita.
- Sistema anti-infezione.**
 Il sistema di drenaggio a circuito chiuso consente di prevenire l'insorgere di infezioni. Una infezione retrograda in espansione sarà minimizzata grazie alla valvola fra il tubo di drenaggio e il palloncino. Inoltre, una continua, debole, pressione è sempre presente (circa 40/20 mm Hg).
- Radiopaco.**
 Una linea radiopaca indica la posizione del drenaggio. Il controllo della posizione del drenaggio tramite raggi X risulta essere estremamente facilitato.
- Minori ostruzioni.**
 Una costruzione speciale del lume e la composizione dell'elastomero in silicone riduce il problema di adesione fibrinosa o della ostruzione dovuta a grumi ematici.
- Trasportabile.**
 La deospedalizzazione anticipata del paziente è facilitata, poiché il sistema di drenaggio è molto leggero.
- Forma piatta.**
 Poiché il tubo di drenaggio è piatto, l'inserimento anche nei campi ristretti (ad esempio: spazio subdurale nelle procedure chirurgiche neurologiche o il viso nella chirurgia plastica) sarà meno traumatica, ma efficace e semplice. Una costruzione appropriata delle pareti del tubo mantiene aperto il lume anche in aspirazione.

Specifiche

- Tubo di drenaggio prodotto in silicone e solfato di bario radiopaco. Lunghezza: 20 cm.
- Tubo di prolunga prodotto in silicone. Lunghezza: 60 cm.
- Palloncini da 150 e 400 cc, prodotti in silicone, apertura palloncino in polipropilene, valvola antireflusso palloncino in silicone.
- Confezione in busta di carta/polietilene.
- Prodotto sterile monouso.

	Codice	Misura	Lunghezza drenaggio	Lunghezza della perforazione	Imballo Pz./Box
Securo Drain	01.3307	7 x 3 mm	20 cm	3/4 (15 cm)	20
	01.3310	10 x 4 mm	20 cm	3/4 (15 cm)	20
	01.3404	4 x 1,5 mm	20 cm	Completo 20 cm	20
	01.3407	7 x 3 mm	20 cm	Completo 20 cm	20
	01.3410	10 x 4 mm	20 cm	Completo 20 cm	20
Palloncino	01.3300	150 cc	-	-	5
	01.3303	400 cc	-	-	2

Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

56

Revisione del 12.06.2018