

# Sonda duodenale di Levin

# Sonda duodenale di Ryles

## Scopo

Introduzione nasogastrica per l'alimentazione enterale o l'aspirazione passiva delle secrezioni intestinali.

## Caratteristiche


- 4 larghi fori laterali che ottimizzano l'efficacia.
- Fori adeguati al fine di evitare l'ostruzione del tubo.
- Resistente al collabimento.
- Materiale trasparente facilita l'osservazione di ciò che viene aspirato.
- Superficie "frozen" elimina il bisogno di lubrificanti.
- La linea e la punta radiopache (Ryles) assicurano il controllo della posizione.
- Codice colore per una rapida identificazione del CH.
- Impiego fino a 4 settimane.
- Dispositivo privo di ftalati come suggerito dal Ministero della Salute (rif. Relazione Consiglio Superiore di Sanità - sessione XLV del 26.05.05 eventualmente disponibile a richiesta).

### Tubo duodenale Levin

4 tacche identificate ad intervalli di 100 mm dalla punta distale (tacca I a 450 mm, tacca II a 550 mm, tacca III a 650 mm e tacca IV a 750 mm). Non contiene lattice. Invasivo.

### Tubo duodenale Ryles

3 tacche identificate ad intervalli di 130 mm dalla punta distale (tacca I a 380 mm, tacca II a 510 mm e tacca III a 640 mm). Non contiene lattice. Invasivo.

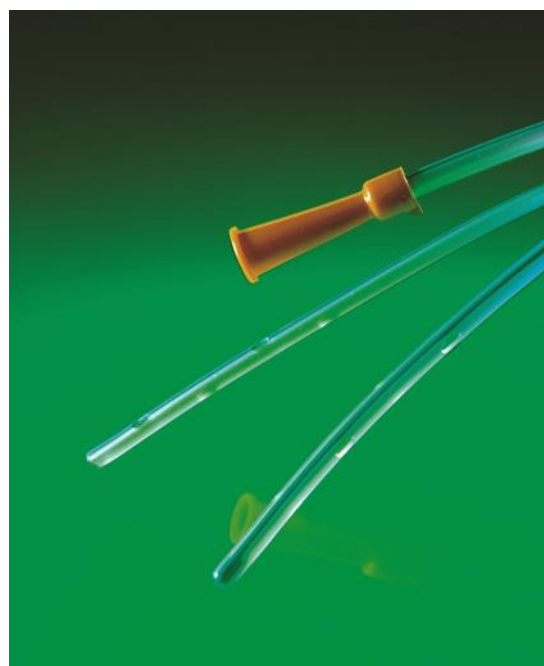


CLASSE IIa  
REGOLA 5  
STERILE EO





Dispositivo privo di ftalati

## Specifiche

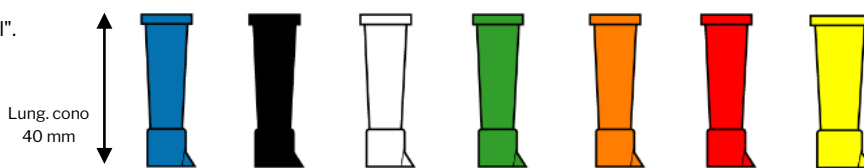- Tubo in PVC ammorbidente: poliadiipati, medical grade, Shore A 78.
- Connettore: PVC, Shore A 78.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).



	Shore A durezza	Lung. senza cono, mm	Diametro esterno del tubo, mm						
			2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	6.7 CH 20
<b>Duodenale Levin</b>  Punta distale aperta - con linea radiopaca	78	1210 Box	1000118X 100*	1000218X 100	1000318X 100	1000418X 50	1000518X 50	1000618X 50	1000718X* 200
<b>Duodenale Ryles</b>  Punta distale chiusa - linea e punta radiopache. Adattatore luer separato	78	1210 Box	1100118X* 800	1100218X* 800	1100318X* 800	1100418X* 600	1100518X* 600	1100618X* 600	1100718X* 200

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

155

Revisione del 13.12.2018