


# Suture per cute e chirurgia plastica



Le suture Med Europe® sono state studiate per offrire al chirurgo plastico la sintesi della qualità indispensabile per ottenere i migliori risultati oggi tecnologicamente possibili. L'alta qualità del prodotto è stata ottenuta da una scrupolosa selezione della componentistica e delle metodiche applicate che descriveremo brevemente qui di seguito.

## Aghi

Gli aghi prodotti in acciaio speciale negli USA, sono a superficie perfettamente speculare. Le punte sono prodotte sotto il controllo di un computer che verifica e scarta automaticamente tutti gli aghi con punta non perfetta. L'ago Med Europe® è pertanto caratterizzato da una altissima penetrazione ed una eccezionale scorrevolezza nel tessuto. Tutti gli aghi Med Europe® sono di tipo "drilled" e cioè con foro terminale.

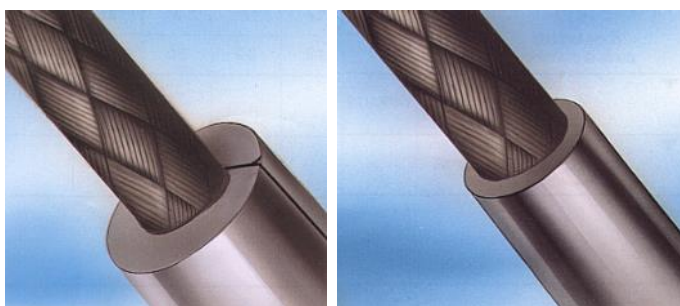

Parte terminale di un ago tradizionale tipo "channel"


Parte terminale di un ago Med Europe® tipo "drilled"

Questa caratteristica comparata ai superati aghi di tipo "channel" consente un minor trauma sui tessuti. Il foro terminale degli aghi Med Europe® "drilled" viene ottenuto utilizzando un raggio laser computerizzato che centra automaticamente il foro rispetto alla sezione cilindrica dell'ago. Tale metodica consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile nella parte terminale dell'ago ospitando così suture del calibro più grande possibile. Il risultato è una eccezionale armonia di proporzioni tra la parte terminale dell'ago ed il filo di sutura montato sullo stesso. Il chirurgo sarà così sempre certo di ottenere la massima atraumaticità possibile. Il montaggio tra ago e filo di sutura viene controllato al microscopio e poi con uno speciale test "anti-distacco". Ciò sul 100% della produzione anziché a "campione", come normale pratica industriale.

## Filo di sutura

I fili di sutura offerti da Med Europe® sono stati oggetto di anni di ricerche svolte nei più avanzati mercati internazionali. Il risultato è una selezione di suture che garantisce quei requisiti di inerzia, scorrevolezza, non capillarità, elasticità, uniformità di calibro e facilità al nodo che, dipendentemente dal tipo di suture scelte per ogni diversa fase operatoria, i più esigenti chirurghi plastici desiderano sempre riscontrare durante il loro delicatissimo lavoro.

Le varie tipologie e relative caratteristiche delle suture Med Europe® sono illustrate in modo approfondito nel catalogo specifico.

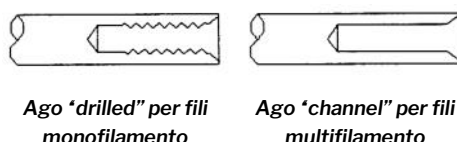

Ago "drilled" per fili monofilamento

Ago "channel" per fili multifilamento



CLASSE IIb  
REGOLA 8  
STERILE R



AD ESAURIMENTO

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

20


Revisione del 12.06.2018

# Suture per cute e chirurgia plastica

## Seta MED SILK®



Box da 24 suture

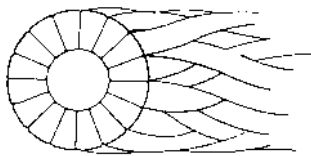

- Non capillare per non estendere una eventuale infezione.
- Scorrevole per poi consentire un agevole rimozione del punto di sutura.

La non capillarità della seta intrecciata rivestita è ottenuta tramite uno speciale “silicone coating” che consente sia il blocco di eventuali trasferimenti di sieri infetti che, soprattutto, una assoluta scorrevolezza e morbidezza della sutura di seta quando questa viene in contatto con il sangue. Come è noto, il silicone è idrorepellente e “scivola” sul liquido. Per tale ragione sia la scorrevolezza che la morbidezza sia della seta che di tutte le altre suture multifilamento, non devono essere valutate “a secco” ma esclusivamente quando “bagnate”. Ciò poiché è impossibile che le suture non si impregnino di sangue durante l’uso.

Il dosaggio di “silicone coating” applicato su questa speciale seta è stato tarato al fine di ottenerne la massima scorrevolezza e morbidezza nel tessuto, mantenendo contestualmente una leggera elasticità e, quindi, la massima facilità al nodo; requisito quest’ultimo anch’esso irrinunciabile per ogni esigente chirurgo.



AGO TAGLIANTE ESTERNO	LUNGHEZZA FILO DI SUTURA	COLORE FILO DI SUTURA	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
			U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.
			0.7 Metrico	1 Metrico	1.5 Metrico	2 Metrico	3 Metrico
C-1 3/8 CERCHIO 10.7 mm 	45 cm	nero	S-406BD-2				
C-3 3/8 CERCHIO 13.0 mm 	45 cm	nero		S-405BD-2	S-404BD-2		
C-6 3/8 CERCHIO 18.7 mm 	45 cm	nero		S-405AD-2	S-404AD-2	S-403BD-2	
C-7 3/8 CERCHIO 24.3 mm 	45 cm	nero				S-403AD-2	S-402BD-2






Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

21

## Seta MED SILK®

AGO TAGLIANTE ESTERNO	LUNGHEZZA FILO DI SUTURA	COLORE FILO DI SUTURA	3-0	2-0	0	1
			U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.
			2	3	3.5	4
			Metrico	Metrico	Metrico	Metrico
C-8 3/8 CERCHIO 26.0 mm 	45 cm	nero		S-402AD-2		
C-9 1/2 CERCHIO 23 mm 	45 cm	nero		S-402CD-2		
C-10 3/8 CERCHIO 29.7 mm 	45 cm	nero			S-401AD-2	
C-10 3/8 CERCHIO 29.7 mm 	75 cm	nero		S-702AD-2	S-701AD-2	
C-11 3/8 CERCHIO 39.2 mm 	75 cm	nero			S-701BD-2	S-791AD-2

**AD ESAURIMENTO**

Distribuito da:

 **Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

22

Revisione del 12.06.2018

# Suture per cute e chirurgia plastica

## Nylon MED LON®



Box da 24 suture

La classica sutura di nylon è sempre stata facile da rimuovere ma troppo difficile da annodare e troppo “dura” da sopportare per il paziente.

Lo speciale MED LON® montato dalla Med Europe® è invece stato scelto per la particolare morbidezza ed elasticità; caratteristiche molto simili a quelle del polipropilene per cardiocirurgia.

I conseguenti vantaggi sono:






- facile da rimuovere
- più facile da annodare
- più sopportabile per il paziente (meno “duro”)
- meno “tagliente” sul tessuto



In sintesi, il MED LON® incontra le necessità del dentista più esigente ed avanzato.

Il MED LON® è inoltre molto adatto ad essere utilizzato come sutura intradermica nella chirurgia maxillo-facciale.

### AD ESAURIMENTO

AGO TAGLIANTE ESTERNO	LUNGHEZZA FILO DI SUTURA	COLORE FILO DI SUTURA	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
			U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.	U.S.P.
			0.7 Metrico	1 Metrico	1.5 Metrico	2 Metrico	3 Metrico
C-1 3/8 CERCHIO 10.7 mm 	45 cm	blu	N-406AD-2				
C-3 3/8 CERCHIO 13.0 mm 	45 cm	blu		N-405CD-2	N-404BD-2		
C-6 3/8 CERCHIO 18.7 mm 	45 cm	blu		N-405DD-2	N-404AD-2	N-403BD-2	
C-7 3/8 CERCHIO 24.3 mm 	45 cm	blu				N-403AD-2	
C-8 3/8 CERCHIO 26.0 mm 	45 cm	blu					N-402AD-2

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

23

Revisione del 12.06.2018