

Catetere vescicale Foley

Scopo

Per cateterizzazione vescicale tramite introduzione nell'uretra.

Caratteristiche

Punta distale retta e arrotondata:

- introduzione atraumatica
- riduce il rischio di infezione e/o lesione alla membrana delle mucose

Fori laterali di diametro compatibile con il lume del catetere:

- massimo drenaggio
- rischio ridotto di ostruzioni

Palloncino:

- gonfiamento sicuro, simmetrico
- sgonfiamento completo per facilitare l'estrazione del catetere.

Monouso - Sterile

Confezionamento in doppio involucro.


Box da 10 pezzi.



Specifiche


In lattice siliconato

- Prodotto in lattice e successivamente trattato con silicone al fine di facilitare l'inserimento nell'uretra.
- Lunghezza: 270 mm tipo pediatrico, 400 mm tipo adulti.
- Disponibile nelle misure da CH 08 a CH 24.
- Porta a 2 vie.
- Palloncino d'ancoraggio da 5-15 ml.

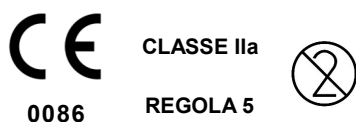

In puro silicone 100%

- Prodotto in puro silicone 100% ad elevata biocompatibilità, inerte e idrorepellente, garantisce maggiore comfort e sicurezza.
- Massima riduzione del rischio di irritazione e/o infezioni.
- Valvola in materiale plastico duro.
- Lunghezza: 311 mm tipo pediatrico, 400 mm tipo adulti.
- Disponibile nelle misure da CH 08 a CH 24.
- Porta a 2 vie.
- Palloncino d'ancoraggio da 3-5 ml, 5-10 ml.

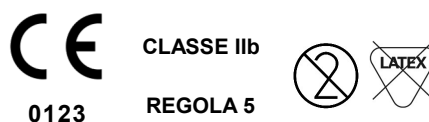

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

118

Revisione del 16.11.2021