


# Cateteri per epistassi in silicone

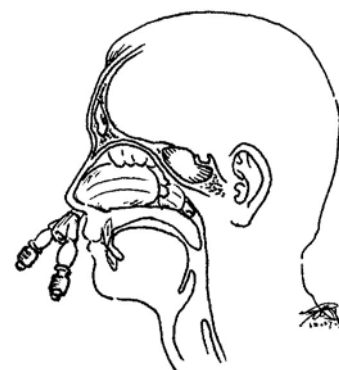

## Caratteristiche

- Realizzati al 100% in silicone “medical grade” per garantire la massima biocompatibilità.
- I palloni gonfiabili flessibili determinano una pressione sui tessuti diretta ed uniforme.
- La punta distale arrotondata e la morbidezza del silicone facilitano l’inserimento e l’atraumaticità del dispositivo.
- Il pallone prossimale da 30 cc consente il controllo delle emorragie anteriori e centrali.
- Il pallone distale consente il controllo delle emorragie posteriori.
- Il canale centrale aperto consente il mantenimento della normale attività respiratoria del paziente.
- Ogni pallone è controllato da un cuff per la verifica del gonfiaggio e per evitare sovrappressioni.
- Ideale per le procedure chirurgiche di settoplastica, rinoplastica ed intranasali.

Codice	RDM	Capacità pallone	Lunghezza	CH	Applicazione	Box
3103-0930	1502941/R	30 e 10 cc	111 mm	24	Anteriore e posteriore	10 pz.

Distribuito da:



Società certificata  
 UNI EN ISO 13485:2016  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it