


Magneto Reusable

Tappetino magnetico riutilizzabile per campo sterile

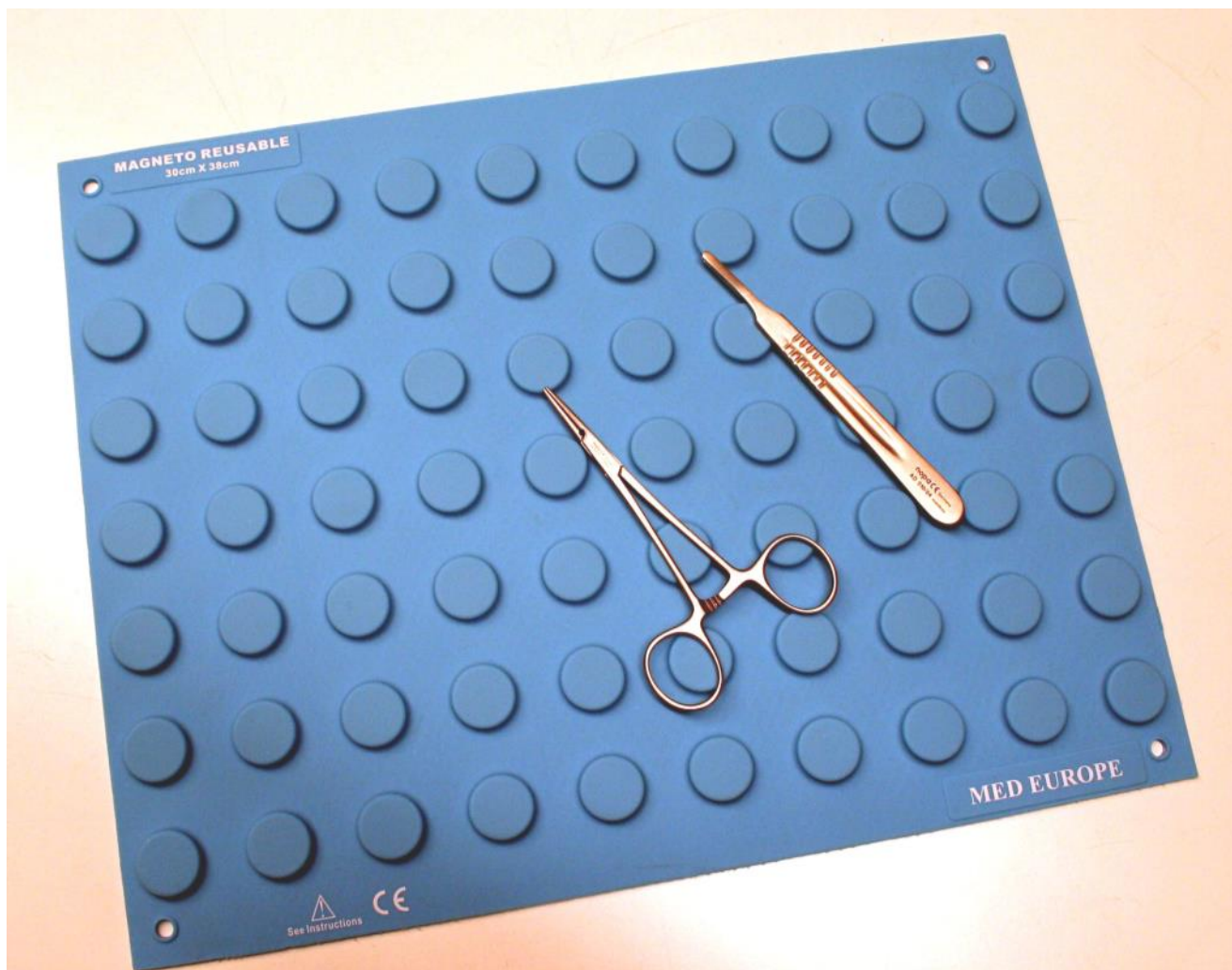

Scopo

Destinato a minimizzare il rischio connesso con la manipolazione dello strumentario chirurgico in sala operatoria.

Descrizione

Tappeto magnetico per campo sterile riutilizzabile, risterilizzabile. I dischetti magnetici incapsulati nel tappeto silconico trattengono saldamente i ferri chirurgici i quali possono però essere facilmente distaccati manualmente. Dotato di rete interna in nylon per una maggiore resistenza del materiale. I dischetti distanziati permettono una agevole presa. Dotato di quattro occhielli per un più agevole e sicuro fissaggio. Può essere usato anche rovesciato, il fondo è liscio.

Specifiche

- Fabbriato in silicone medical grade, nylon e magnete.
- Dimensioni 30 x 38 cm, peso: 795 grammi.
- Mantiene la propria integrità per almeno 300 cicli di sterilizzazione, sempre se utilizzato nel rispetto delle istruzioni per l'uso che accompagnano il dispositivo.
- Sterilizzabile a vapore in autoclave (121 °C per 20 minuti o 134 °C per 6 minuti).
- Non sterile.
- Privo di lattice.
- Confezionati singolarmente.

Codice

REF MAG-R001



CLASSE I

REGOLA 1

CND V9099

RDM 11302/R

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

20

Revisione del 02.10.2019