

MEDI DRAIN

Catetere di drenaggio capillare Penrose in silicone



Descrizione

MEDI DRAINS di silicone grado medicale, per il drenaggio post-operatorio delle ferite.

Il drenaggio rimane morbido e flessibile e può essere facilmente rimosso grazie alle sue proprietà anti-aderenti.

Il drenaggio in silicone tipo Penrose è, contrariamente al lattice, idrorepellente il che riduce il rischio di ostruzione del lume interno a causa dell'adesione di produzioni ematiche o secrezioni.

Anche se il drenaggio si attorciglia durante la procedura chirurgica non ne sarà danneggiato.

La struttura chiusa asimmetrica del lume determina una capillarità ottima.


I MEDI DRAINS sono stati sviluppati per sostituire la garza e il lattice riducendo il rischio di infezione.

Caratteristiche e specifiche

- La linea bianca radiopaca permette un posizionamento appropriato ed il controllo del drenaggio.
- Sono disponibili in lunghezze di 30 e 50 cm di quattro diametri differenti, adatti in varie circostanze.
- Hanno una compatibilità eccellente con il corpo umano, poiché il materiale è inerte e non tossico.
- Sterile e confezionato in doppia busta per uso immediato. Box 25 pz.

Forma	Materiale	Diametro	MEDI DRAIN 30 cm	MEDI DRAIN 50 cm
	Silicone	6 mm	01.2936	01.2956
	Silicone	8 mm	01.2938	01.2958
	Silicone	10 mm	01.2930	01.2950
	Silicone	12 mm	01.2932	01.2952
	Silicone	40 mm	01.2940	

5/6 8 10 12

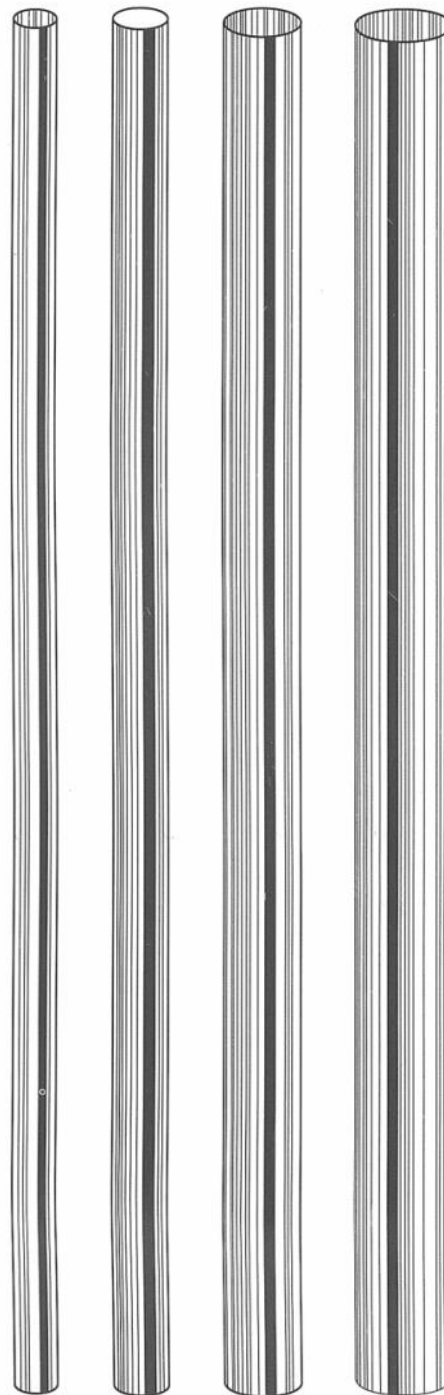

CE
0482

CLASSE IIa
STERILE EO



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

38

Revisione del 12.06.2018